

barza®

test de
sarcină
pe săptămâni
stilou

Test rapid semicantitativ
pentru autotestare
Acuratețe peste 99%

Testul de sarcină pe săptămâni Barza este un test de sarcină rapid, pentru autotestare, semicantitativ, pentru depistarea hormonului hCG (gonadotropină corionică umană) în urină, principala modalitate de a identifica o sarcină, chiar de la prima zi de întârziere a ciclului menstrual.

Conținutul cutiei

- Un plic din aluminiu cu testul tip stilou și desicant. Desicantul este utilizat pentru depozitare, nu se folosește în procedura de testare.
- Un prospect cu instrucțiuni de utilizare.

Precauții

1. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.
2. Este recomandată consultarea medicului specialist dacă bănuieți că sunteți însărcinată.
3. Testul este un dispozitiv de unică folosință pentru testare in vitro. Acesta nu trebuie reutilizat.
4. Testul trebuie utilizat înainte de data expirării.
5. Testul nu trebuie utilizat în cazul în care plicul din aluminiu este deteriorat sau deschis.
6. Plicul sigilat din aluminiu conține desicant. Acesta nu trebuie ingerat.
7. Atât mostra de urină, cât și celelalte materiale utilizate, trebuie considerate materiale infecțioase și trebuie evitat contactul cu pielea.
8. În cazul în care testul a fost ținut la frigider, acesta trebuie adus la temperatura camerei înaintea utilizării. Testul trebuie utilizat imediat după desigilarea plicului din aluminiu.
9. Când concentrația hCG este foarte ridicată, linia colorată din zona de control C poate să apară estompată. Acest lucru este normal.
10. În cazul sarcinii timpurii, concentrația hCG este scăzută, de aceea poate să apară un rezultat fals negativ. Se recomandă repetarea testării după 2-3 zile.
11. În cazul femeilor cu fibrom uterin, sarcină molară (mola hidatiformă) sau la menopauză, concentrația hCG este mai ridicată, de aceea pot apărea rezultate fals pozitive.
12. Pentru sarcinile ectopice sau anormale trebuie utilizate alte metode de testare.
13. Conținutul hCG în urină este direct influențat de aportul de apă astfel că rezultatele testului pe parcursul zilei pot să difere. Se recomandă utilizarea primei urine de dimineață.

Depozitare și stabilitate

Păstrați testul la temperaturi între 2 și 30 ° C, în plicul sigilat. A nu se folosi după data de expirare. A se păstra departe de lumina solară, umezeală și căldură. A nu se congela.


Când se poate face testul?

Puteți efectua acest test de la prima zi de întârziere a ciclului menstrual. Testul poate fi efectuat în orice moment al zilei, însă trebuie ținut cont de faptul că prima urină de dimineață conține cel mai ridicat nivel de hCG. Se recomandă să nu consumați lichide cu 2 ore înainte de efectuarea testului. În cazul în care rezultatul este negativ, este posibil ca nivelul hormonului să fi fost prea scăzut pentru a vă oferi un rezultat pozitiv. În acest caz, se recomandă să repetați testarea după două zile. Dacă testul este în continuare negativ iar menstruația întârzie să apară, contactați medicul.

Cum se efectuează testul?

Testul trebuie să rămână în plicul sigilat până în momentul în care veți efectua testul. Scoateți testul din plic, rupându-l prin locul indicat, apoi îi îndepărtați capacul.

1. Țineți testul cu capătul absorbant în jos, poziționându-l sub jetul de urină timp de 10-15 secunde. Altă variantă este să colectați urină într-un recipient curat și uscat și să introduceți zona absorbantă în urină timp de 10-15 secunde.
2. Puneți capacul și poziționați testul pe o suprafață plană, cu fereastra pentru citirea rezultatului în sus.
3. În funcție de concentrația hormonului hCG din proba de urină, veți putea citi rezultatul după 5 minute.
4. Nu citiți rezultatul după 10 minute.

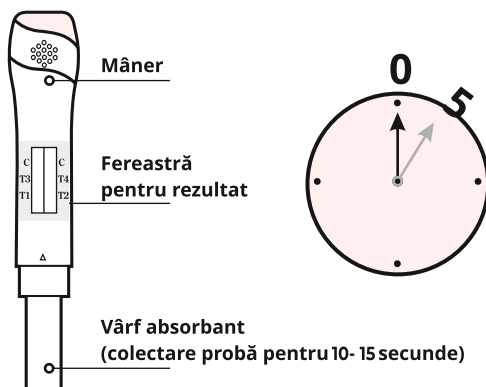

Interpretarea rezultatelor

Negativ

În cazul prezenței doar a liniilor colorate în zonele de control C, din stânga și din dreapta, concentrația hCG este mai mică de 25 mIU/ml, indicând un rezultat negativ. Acest lucru înseamnă că o sarcină nu a fost identificată sau că nivelul hCG în urină este sub nivelul de 25 mIU/ml.

Pozitiv

1-2 săptămâni

În cazul prezenței liniilor colorate în zonele de control C, precum și a liniilor colorate în zona de testare T1, concentrația hCG este mai mare sau egală cu 25 mIU/ml și mai mică de 100 mIU/ml, indicând un rezultat pozitiv. Acest lucru înseamnă că sunteți însărcinată în 1-2 săptămâni și ar trebui să consultați medicul pentru confirmarea sarcinii și stabilirea pașilor următori.

2-3 săptămâni

În cazul prezenței liniilor colorate în zonele de control C, precum și a liniilor colorate în zonele de testare T1 și T2, concentrația hCG este mai mare sau egală cu 100 mIU/ml și mai mică de 300 mIU/ml, indicând un rezultat pozitiv. Acest lucru înseamnă că sunteți însărcinată în 2-3 săptămâni și ar trebui să consultați medicul pentru confirmarea sarcinii și stabilirea pașilor următori.

barza®

test de
sarcină
pe săptămâni
stilou

Test rapid semicantitativ
pentru autotestare
Acuratețe peste 99%

3-4 săptămâni


În cazul prezenței liniilor colorate în zonele de control C, precum și a liniilor colorate în zonele de testare T1, T2 și T3, concentrația hCG este mai mare sau egală cu 300 mIU/ml și mai mică de 1000 mIU/ml, indicând un rezultat pozitiv. Acest lucru înseamnă că sunteți însărcinată în 3-4 săptămâni și ar trebui să consultați medicul pentru confirmarea sarcinii și stabilirea pașilor următori.

mai mult de 4 săptămâni

În cazul prezenței liniilor colorate în zonele de control C, precum și a liniilor colorate în zonele de testare T1, T2, T3 și T4, concentrația hCG este mai mare sau egală cu 1000 mIU/ml, indicând un rezultat pozitiv. Acest lucru înseamnă că sunteți însărcinată în mai mult de 4 săptămâni și ar trebui să consultați medicul pentru confirmarea sarcinii și stabilirea pașilor următori.

Invalid

În cazul în care nu apare nicio linie colorată în zona de control C, rezultatul este invalid. În acest caz, trebuie să repetați testarea. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul local.

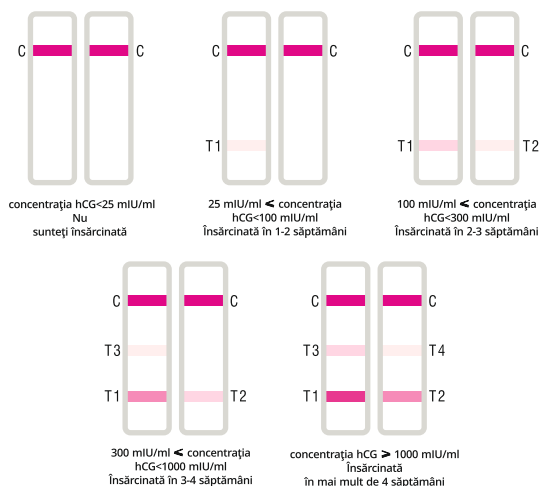

Sensibilitate

Testul de sarcină pe săptămâni Barza va detecta concentrația de hCG mai mare sau egală cu 25 mIU/ml.

Specificitate

Specificitatea testului de sarcină pe săptămâni Barza a fost determinată prin studii de reactivitate încrucișată cu cantități cunoscute de hormon luteinizant (hLH), hormon de stimulare foliculară (hFSH) și hormon de stimulare tiroidiană (hTSH).

Rezultate negative au fost obținute pentru toate testele efectuate cu concentrații hLH < 500 mIU/ml, concentrații hFSH < 1000 mIU/ml, concentrații hTSH < 1000 μ IU/ml.

Bibliografie

1. Chard T. Pregnancy tests: a review. Hum Reprod. 1992 May; 7(5):701-10.Re-view.
2. American Pregnancy Association. Human Chorionic Gonadotropin (hCG): The Pregnancy Hormone. <http://www.americanpregnancy.org/duringpregnan-cy/hcglevels.html>
3. Womens health Research. Dept. of OB/GNY, University of New Mexico.HCG Reference Service. <http://www.hcglab.com/hCG%20levels.htm>
4. Chayen J, Daly JR, Loveridge N. The cytochemical bioassay of hormones. Recent Prog. Horm. Res. 1976;32:33-72.
5. Henry JB. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 18th ed-ition, 1991, WB Saunders and Co.
6. Wide L, Gemzell CA. An immunological pregnancy test. Acta Endocrinology 1960;35:261.
7. Cart, K.J. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1975,40:537
8. Braustein, G. D. Am J. Obstet. Gynecol., 1976,126:678
9. Batzer, F.R. Fertility & Sterility, 1980,34:1.
10. Engvall, E. Method in Enzymology, 1980,70:419

Index simboluri

IVD	Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro	Citiți instrucțiunile de utilizare	Data expirării
Teste incluse în kit	Țara de fabricație	A se feri de umezeală	
LOT	Numărul lotului	Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană	A se feri de lumina soarelui

Producător	Anu se reutiliza	Număr catalog
A se păstra la temperaturi între 2-30 °C	Importator	Identificator unic al dispozitivului
Marcaj de conformitate CE	Dispozitiv pentru autotestare	Dispozitiv testare în proximitatea pacientului

Produs pentru: SC SELF CARE MEDICAL SRL
Str. Pipera - Tunari nr. 51, Voluntari, Jud. Ilfov.
T 021 264 39 50 office@scdg.ro



TEL VERDE
0800 822 792

TESTULBARZA.RO

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Test de unică folosință. A nu se utiliza după data expirării. Numai pentru uz extern. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru diagnosticare in vitro, pentru autotestare, dintr-o probă de urină. A se păstra la o temperatură între 2-30°C. A nu se refrigeră.

Blue Cross Bio-Medical (Beijing) Co. Ltd; Beijing Industry Zone, Changping District, Beijing, P.R.C., 102209



SUNGO Cert GmbH. Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf, Germania

CE 0123 REF BRZ55

Revizuit: 10/2023 V2