

barza®

test de
sarcină
digital
stilou

Afli în câteva minute
Acuratețe mai mare de 99%
Sensibilitate: 25 mIU/ml

Testul de sarcină Barza digital este un test rapid, ușor de efectuat. Detectează calitativ prezența hormonului hCG (gonadotropina corionică umană) în urină. Pentru diagnostic in vitro, pentru autotestare.

PRINCIPIUL TESTULUI

În timpul testării, proba de urină reacționează cu particulele acoperite cu anticorpi specifici. Amestecul migrează pe membrana cromatografică prin capilaritate și reacționează cu anticorpii specifici pentru a produce o linie de testare colorată vizibilă. Semnalul rezultat este convertit electric de un fotodiod și apoi analizat de software și afișat pe ecranul LCD.

PRECAUȚII

Vă rugăm să citiți toate informațiile din prospect înainte de a efectua testul. Respectați precauțiile de mai jos pentru rezultate corecte și interpretarea adecvată a rezultatului.

- Protecția testului poate fi afectată dacă este utilizat altfel decât este descris în prospect.
- Nu utilizați după data de expirare imprimată pe ambalaj.
- Pentru utilizare în interior.
- Respectați condițiile de mai jos:
Condiții de depozitare și transport: 2–30°C (35,6–86°F), ≤90% RH, 86–106 kPa
Condiții de funcționare: 15–30°C (59–86°F), ≤90% RH, 86–106 kPa
- Nu utilizați dacă plicul este perforat sau deteriorat.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu atingeți banda reactivă.
- Pentru diagnostic in vitro.
- Nu deschideți plicul până când nu sunteți gata să efectuați testul. Odată deschis, utilizați în decurs de o oră.
- Testul conține baterii. Aruncați testul conform reglementărilor locale.
- Grad de poluare: II
- Numai pentru o singură utilizare.
- Testul de sarcină Barza digital îndeplinește cerințele de imunitate și emisii. Măsurile incluse în dispozitivul electronic oferă protecție împotriva efectului de interferență electromagnetică. Se recomandă:
Utilizarea testului într-un mediu uscat, în special dacă sunt prezente materiale sintetice (haine, covoare) ce pot cauza descărcări electrostatice ce oferă rezultate eronate.
- Nu utilizați în apropierea surselor puternice de interferență electromagnetică (de exemplu telefoane mobile)

CONȚINUTUL CUTIEI

- Un plic sigilat ce conține un test de sarcină Barza digital
- Prospect

Materiale necesare, dar nefurnizate:

- Ceas sau cronometru
- Recipient pentru colectarea urinei

INSTRUCȚIUNI




Important:

Pe parcursul testării, nu țineți testul cu vârful absorbant orientat în sus.

Pasul 1

Scoateți testul din plicul sigilat și îndepărtați capacul. Țineți mânerul antiderapant cu vârful absorbant orientat în jos.

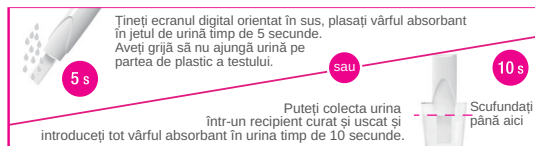

Pasul 2


Puneți la loc capacul și așezați testul pe o suprafață plană cu ecranul digital orientat în sus.



Simbolul ceasului ⌚ va apărea și va clipi pe ecranul digital, indicând faptul că testul funcționează.

Pasul 3

În aproximativ 3 minute, rezultatul „DA+” sau „NU-” va apărea pe ecranul digital.

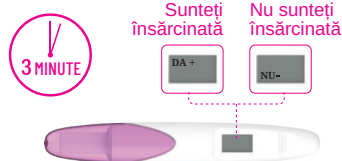

CITIREA REZULTATULUI

DA+ apare pe ecran, înseamnă că probabil sunteți însărcinată.

NU- apare pe ecran, înseamnă că probabil nu sunteți însărcinată.

Rezultatul va rămâne afișat aproximativ o oră.

Dacă apar alte simboluri, consultați secțiunea Erori de testare.

LIMITĂRI

Testul poate oferi rezultate eronate. Consultați medicul înainte de a lua decizii medicale.

1. Medicamentele care conțin hCG (de ex. Pregnyl, Profasi, APL) pot produce rezultate fals pozitive. Alcoolul și analgezicele ce nu conțin hCG nu ar trebui să afecteze rezultatul testului.
2. Probe de urină foarte diluate pot să conțină niveluri foarte scăzute de hCG. Dacă sarcina este suspectată, repetați testarea după 48 de ore, utilizând prima urină de dimineață.
3. Anumite afecțiuni pot produce rezultate fals pozitive în cazul prezenței unei boli trofoblastice sau tumori testiculare, cancer de prostată, cancer de sânge, cancer de plămâni ce presupun niveluri ridicate de hCG. De aceea, prezența hCG în urină se poate utiliza pentru depistarea unei sarcini, dacă aceste afecțiuni au fost excluse.
4. Testul poate produce rezultatele fals negative în cazul în care nivelul hCG este sub nivelul de sensibilitate al testului. Pot apărea în sarcină timpurie sau urină diluată. Dacă sarcina este în continuare suspectată, repetați testarea după 48 de ore, utilizând prima urină de dimineață. Dacă și al doilea test oferă un rezultat negativ, trebuie consultat un medic.
5. Testul este destinat diagnosticării probabile a sarcinii. Confirmarea unei sarcini trebuie făcută de către un medic după o evaluare clinică.
6. Urina de culoare neobișnuită (roșie, brună) poate duce la rezultate incorecte.

ERORI DE TESTARE

- Dacă apare acest simbol de eroare, poate însemna:
 - Vârful absorbant nu a fost orientat în jos în timpul colectării urinei.
 - A fost absorbită prea multă urină.
 - Alte instrucțiuni de utilizare nu au fost respectate.

- Dacă nu apare nimic pe ecranul digital, testul nu a funcționat corespunzător. Posibile cauze pot fi:
 - Proba de urină a fost prea puțină pentru a începe testarea.
 - Testul a depășit data de expirare.
 - Alte instrucțiuni de utilizare nu au fost respectate.
- Dacă apare oricare din aceste erori, repetați testul cu un nou dispozitiv, respectând instrucțiunile de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1. Cât de precis este Testul de sarcină Barza digital?
A fost efectuată o evoluare clinică pe 142 probe de urină iar rezultatele obținute au fost comparate cu alte teste de urină pentru hCG. Acuratețea testului este de peste 99%.
2. Cum funcționează testul?
În cazul unei sarcini, corpul produce hormonul hCG (gonadotropina corionică umană). Valoarea lui crește în primele stadii ale sarcinii. Testul de sarcină Barza digital poate detecta valori ale hormonului în urină începând cu 25 mIU/mL.
3. Trebuie utilizată prima urină de dimineață?
Testul se poate efectua în orice moment al zilei. Cu toate acestea, prima urină de dimineață conține cele mai ridicate niveluri de hCG. Astfel, se pot obține cele mai precise rezultate.
4. Cât de sensibil este testul?
Testul de sarcină Barza digital detectează niveluri de hCG în urină de 25 mIU/mL sau mai mari. În cazul unui studiu de reactivitate încrucișată cu LH (300 mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) și TSH (1000 mIU/mL) pentru 0 mIU/mL hCG sau 25 mIU/mL hCG, aceste substanțe nu au interferat cu rezultatul testului.
5. Cum trebuie procedat dacă rezultatul testului este DA+?
Este posibil să fiți însărcinată. Consultați medicul pentru a confirma sarcina.
6. Cum trebuie procedat dacă rezultatul testului este NU-?
Este posibil să nu fiți însărcinată sau nivelul hormonului hCG sa fie sub nivelul detectat de test. Dacă menstruația nu apare după o săptămână de la data probabilă, repetați testarea. Dacă rezultatul este același, consultați medicul.
7. Pe ecranul digital a apărut simbolul "??". Ce reprezintă?
Simbolul "??" indică o eroare ce a apărut în timpul testării. Trebuie să repetați testarea cu un nou dispozitiv și să citiți cu grijă instrucțiunile. A se consulta Erori de testare.
8. Am efectuat testul însă pe ecranul digital nu a apărut niciun rezultat. Ce înseamnă acest lucru?
În cazul în care nu apare niciun rezultat, vă rugăm să consultați Erori de testare.

ELIMINAREA TESTULUI

Testul conține baterii, acestea trebuie îndepărtate înainte de eliminarea dispozitivului. Bateriile trebuie aruncate în conformitate cu reglementările locale. Pentru îndepărtarea bateriilor, introduceți o monedă în fantă și răsuciți pentru a deschide partea din spate a testului.


Atenție: Nu dezasamblați, reîncarcați sau aruncați bateriile în foc. Restul testului trebuie aruncat în conformitate cu metoda de reciclare a echipamentelor electronice. A nu se arunca în foc.

BIBLIOGRAFIE

1. Dawood MY, BB Saxena, R. Landesman, Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172-181
2. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross, Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms, Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 39-45

INDEX SIMBOLURI

	Consultați instrucțiunile înainte de utilizare		Teste per kit
	A se păstra la temperaturi între 2° și 30° C		Producător
	Număr lot		Număr catalog
	A se depozita și transporta ≤90% RH		Data expirării

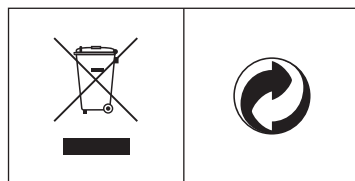

	A nu se reutiliza		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Reprezentant autorizat		Exclusiv pentru diagnosticare in vitro

Distribuitor: SELF CARE MEDICAL S.R.L.
Str Pipera Tunari nr. 51, Voluntari, jud. Ilfov
T: 021 264 39 50; E: office@scdg.ro;
www.selfcaremedical.ro



TEL VERDE
0800 822 792

TESTULBARZA.RO



Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd.

#550, Yin Hai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area, Hangzhou 310018 P.R. China
web: www.alltests.com.cn email: info@alltests.com.cn



MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany



0123

REF FHC-E103H